

Document d'information à destination des patients

Guide d'utilisation du stylo de Yorvipath® (palopegtériparatide)

Stylo prérempli



Yorvipath® existe en 3 stylos différents (168mcg, 294mcg et 420mcg)
en fonction de la dose à administrer.



Retrouvez la **vidéo de démonstration du stylo Yorvipath®**
en flashant ce QR code ou en vous rendant sur ce site internet :
<http://ascendispharma.fr>

Votre médecin vous a prescrit Yorvipath® dans le cadre de la prise en charge de votre hypoparathyroïdie chronique.

Veillez lire attentivement la notice présente dans la boîte de votre médicament avant de l'utiliser car elle contient des informations importantes pour vous. **Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les 3 stylos Yorvipath® et leur couleur associée

Il existe 3 stylos Yorvipath® différents, en fonction de la dose à administrer. Ces stylos se différencient par **un code couleur** :



La boîte bleue contient le stylo Yorvipath® avec **une étiquette et un bouton-poussoir bleus**, qui administre des doses de **6, 9 ou 12 microgrammes**.

La boîte orange contient le stylo Yorvipath® avec **une étiquette et un bouton-poussoir oranges**, qui administre des doses de **15, 18 ou 21 microgrammes**.

La boîte bordeaux contient le stylo Yorvipath® avec **une étiquette et un bouton-poussoir bordeaux**, qui administre des doses de **24, 27 ou 30 microgrammes**.

Le contenu de la boîte

Chaque boîte de Yorvipath® contient **2 stylos préremplis et 30 aiguilles jetables à usage unique**, pour 28 jours de traitement :



1 stylo prérempli

Chaque stylo prérempli est destiné à un traitement de **14 jours**.




15 aiguilles jetables

(dont 1 aiguille de rechange).


x 2

Le stylo prérempli Yorvipath® et l'aiguille

Le stylo :

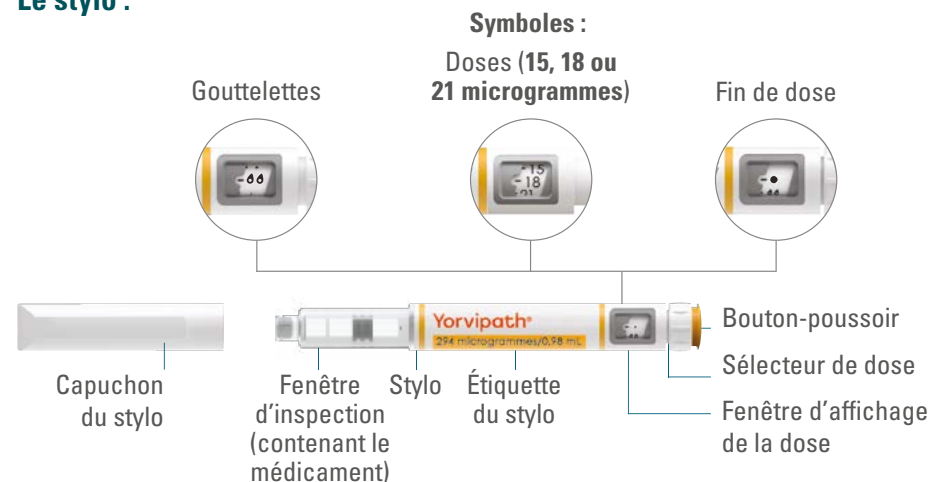

L'aiguille :

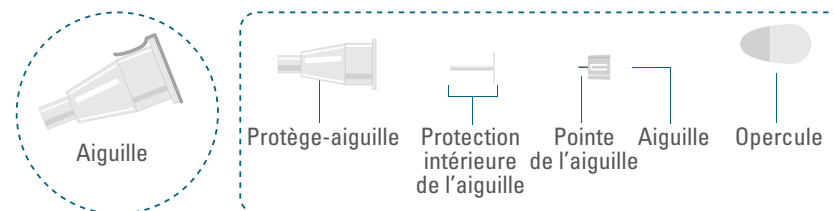

VOUS AUREZ ÉGALEMENT BESOIN DE : (NON INCLUS DANS LA BOÎTE YORVIPATH®)



Lingette imbibée d'alcool

Contenant pour objets pointus et tranchants



Comment utiliser votre stylo Yorvipath® ?

Avant d'utiliser le stylo pour la première fois, votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère vous montrera comment injecter Yorvipath®. Vous pourrez trouver plus d'informations sur l'utilisation de Yorvipath® dans le mode d'emploi à la fin de la notice contenu dans la boîte.




Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

1 PRÉPAREZ LE STYLO ET L'AIGUILLE

ÉTAPE 1

Prenez le stylo Yorvipath®. Assurez-vous que le dosage est correct et vérifiez la **date de péremption**. Prenez une aiguille et vérifiez la **date de péremption** qui y figure.

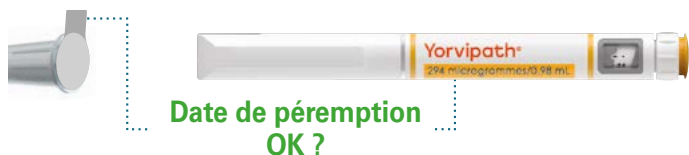


REMARQUE : sortez le stylo du réfrigérateur 20 minutes avant la première utilisation.

ÉTAPE 2

Retirez le capuchon du stylo et regardez par la fenêtre d'inspection pour vous assurer que le médicament contenu dans le stylo est limpide et incolore.


IMPORTANT :
si le médicament contient des particules visibles, n'utilisez pas le stylo. Utilisez-en un nouveau.

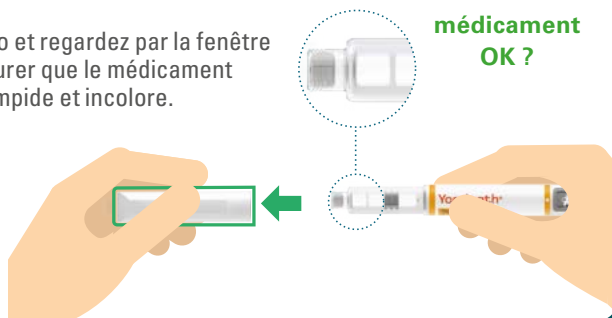

ÉTAPE 3


Retirez l'opercule de l'aiguille.
Cette aiguille ne peut être utilisée **qu'une seule fois**.

Utilisez toujours une nouvelle aiguille pour chaque injection.

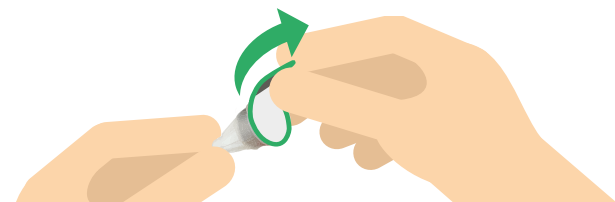


ÉTAPE 4

Fixez l'aiguille d'un **mouvement rectiligne** sur le stylo, puis vissez-la sur le stylo jusqu'à ce qu'elle soit fermement en place.

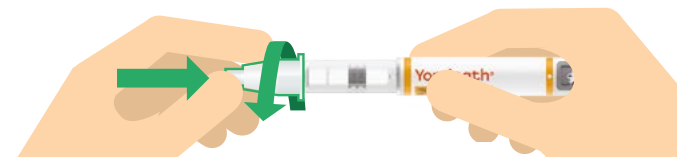

ÉTAPE 5

Retirez-le protège-aiguille et la protection intérieure de l'aiguille.
Jetez la protection intérieure de l'aiguille et conservez-le protège-aiguille pour plus tard.

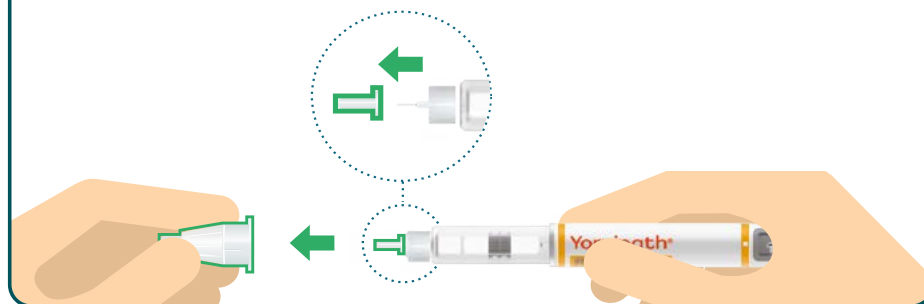

2 SI VOUS UTILISEZ UN NOUVEAU STYLO, VÉRIFIEZ SON ÉCOULEMENT

ATTENTION



Ne testez l'écoulement (étapes A à C) qu'au moment de la première utilisation d'un nouveau stylo. Si vous utilisez déjà le stylo, passez à la rubrique 3 « Préparez l'injection et sélectionnez la dose ».



ÉTAPE A

Tournez le sélecteur de dose de 2 clics dans le sens horaire (vers la droite) jusqu'à ce que la fenêtre de dose affiche le symbole des gouttelettes « ●● »




REMARQUE : vous pouvez toujours corriger la sélection en faisant tourner le sélecteur de dose.

ÉTAPE B

Faites remonter les éventuelles bulles d'air contenues dans le stylo en tapotant sur la fenêtre d'inspection.

Tenez le stylo avec la pointe de l'aiguille dirigée vers le haut.

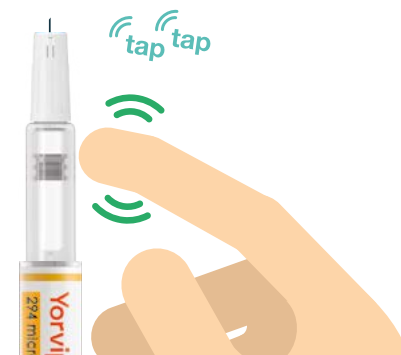


REMARQUE : la présence de minuscules bulles d'air est normale.

ÉTAPE C

Appuyez sur le bouton-poussoir et vérifiez que des gouttes de médicament sortent de la pointe de l'aiguille.

Pendant que vous appuyez, assurez-vous que le sélecteur de dose réaffiche le symbole « ● »

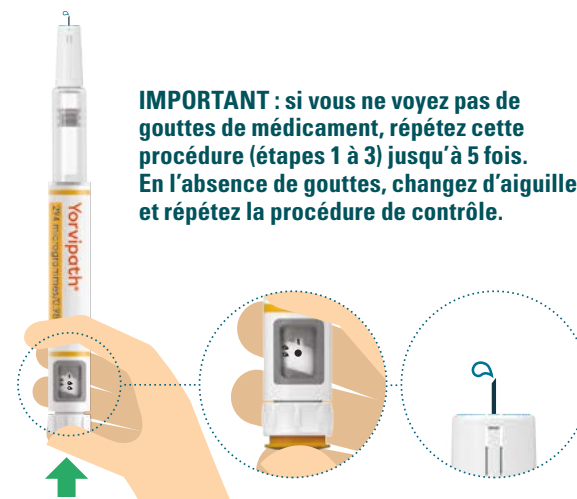

IMPORTANT : si vous ne voyez pas de gouttes de médicament, répétez cette procédure (étapes 1 à 3) jusqu'à 5 fois. En l'absence de gouttes, changez d'aiguille et répétez la procédure de contrôle.


3 PRÉPAREZ L'INJECTION ET SÉLECTIONNEZ LA DOSE

ÉTAPE 6

Choisissez le site d'injection. Vous pouvez effectuer l'injection dans **deux régions du corps**.

Évitez de faire l'injection dans une zone où la peau est rouge ou gonflée, ou sur une cicatrice.

Choisissez un site d'injection différent à chaque injection.

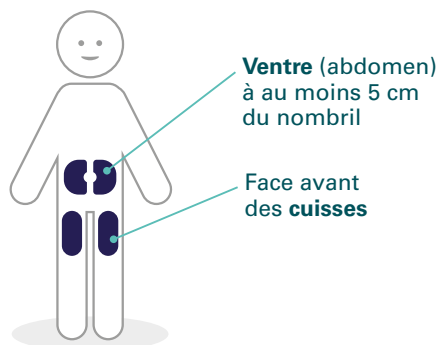

ÉTAPE 7

Lavez-vous les mains et nettoyez le site d'injection à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool.




ÉTAPE 8

Sélectionnez la dose prescrite par votre **médecin** en tournant le sélecteur de dose dans le sens horaire (vers la droite).

IMPORTANT : veillez à ne pas appuyer sur le bouton-poussoir pendant la sélection de la dose afin de ne pas déverser de médicament.

REMARQUE : jetez toujours le stylo et utilisez-en un autre si vous n'arrivez pas à sélectionner une dose complète.

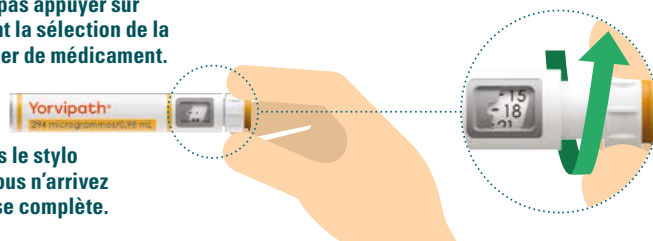

4 INJECTEZ LA DOSE




ATTENTION

Utilisez la technique d'injection recommandée par votre médecin ou infirmier/ère. Lisez la rubrique complète (étapes 9 à 11) avant de commencer l'injection.

ÉTAPE 9

Assurez-vous de voir la fenêtre de dose.

Insérez l'aiguille dans la peau.

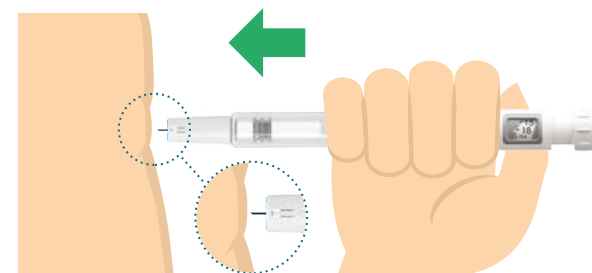


ÉTAPE 10

Appuyez à fond sur le bouton-poussoir et restez en position pendant **5 secondes**.


Assurez-vous que le sélecteur de dose réaffiche le symbole « ● ». Cela signifie que vous avez administré la dose complète.

Appuyez... puis maintenez 5 secondes

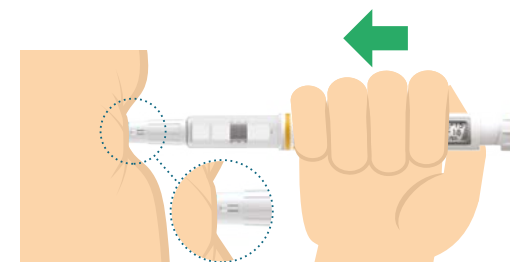

ÉTAPE 11

Retirez lentement le stylo du site d'injection.

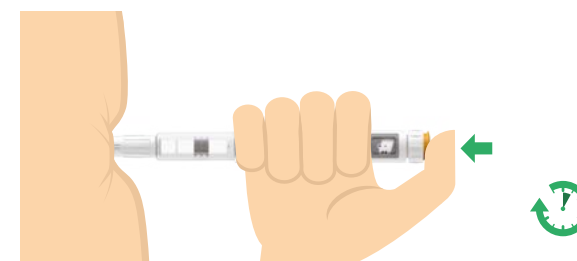


5 JETEZ L'AIGUILLE USAGÉE

ÉTAPE 12


Remettez en place le protège-aiguille pour retirer l'aiguille avec précaution. Introduisez la pointe de l'aiguille dans la protection de l'aiguille et fixez le protège-aiguille sur l'aiguille.

Important : fixez toujours le protège-aiguille avant de retirer l'aiguille afin de réduire le risque de piqure d'aiguille et de contamination croisée.

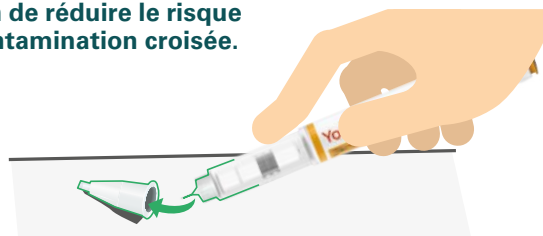

ÉTAPE 13

Dévissez l'aiguille et jetez-la de manière sécurisée conformément aux réglementations locales.

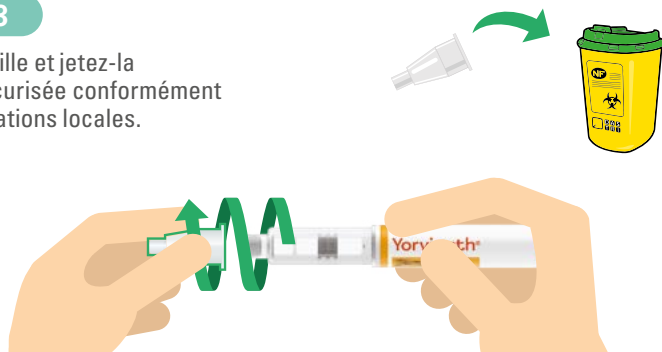

ÉTAPE 14

Placez le capuchon fermement sur le stylo pour le protéger entre deux injections et protéger le médicament de la lumière.



6 JETEZ LE STYLO USAGÉ

Important : jetez toujours le stylo 14 jours après sa première utilisation, conformément aux réglementations locales. Il est recommandé de compléter le champ « Date d'ouverture : » sur l'emballage intérieur afin de savoir quand les 14 jours se sont écoulés.



Jetez toujours le stylo et toute aiguille restante au bout de **14 jours d'utilisation**, même si le stylo contient encore du médicament. Cela est important pour garantir l'efficacité de votre médicament.

Remarque : si des aiguilles sont fournies dans l'emballage avec votre stylo, n'oubliez pas de jeter l'aiguille supplémentaire lorsque vous jetez votre stylo.



Les DASRI, qu'est-ce que c'est ?

Vous réalisez vous-même vos injections : vous êtes donc responsable de l'élimination de vos déchets ! En effet, certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et pour toute autre personne susceptible d'entrer en contact avec : les DASRI, pour les **Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux**. Ils incluent les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant potentiellement contaminé par des agents biologiques pathogènes représentant alors un risque d'infection.

> Les boîtes à aiguilles / collecteurs

Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de boîtes à aiguilles (ou collecteurs) pour éliminer les seringues et aiguilles usagées. **En aucun cas les DASRI ne doivent être mélangés et éliminés avec les ordures ménagères**, seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être éliminés à la poubelle.

> Comment se procurer ces boîtes à aiguilles ?

Ces boîtes à aiguilles peuvent vous être remises gratuitement, dans les pharmacies de ville ou d'établissement de santé (PUI = Pharmacie à usage intérieur).

> Comment utiliser ces boîtes à aiguilles ?

- Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.
- Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.
- Fermez la boîte à aiguilles définitivement avant élimination.
- Le délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.

> Où faut-il rapporter les boîtes à aiguilles ?

Rapportez la boîte à aiguilles fermée à un point de collecte.



Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez-vous auprès de votre pharmacien/médecin, de votre mairie, sur le site internet <https://www.dastri.fr/nous-collectons/>

Questions fréquentes

Comment conserver mon stylo Yorvipath® ?

- **Avant la première utilisation** : conservez-le au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Ne le congélez pas. Conservez-le dans l'emballage d'origine avec le capuchon du stylo en place, à l'abri de la lumière.
- **Après la première utilisation** : conservez-le à une température ne dépassant pas 30 °C. Conservez-le avec le capuchon sur le stylo prérempli, à l'abri de la lumière.



Entre
2 °C et 8 °C



Maximum
30 °C

Jetez chaque stylo 14 jours après la première utilisation.

Comment faire si la dose de Yorvipath® que je dois m'injecter est supérieure à 30 microgrammes par jour ?

Vous devez administrer **deux injections**, l'une après l'autre, dans des sites d'injection distincts. Pour cela, il est recommandé d'utiliser **un stylo Yorvipath® différent pour la seconde injection quotidienne**, même si les deux stylos ont un bouton-poussoir de la même couleur (dosage identique).


Respectez les étapes du mode d'emploi pour chaque injection (détaillées dans les pages précédentes).



Que faire en cas d'oubli d'une injection de Yorvipath® ?

Si vous oubliez de vous injecter une dose et que vous vous en rendez compte :

- **dans les 12 heures qui suivent votre horaire habituel d'administration** : vous pouvez vous l'injecter dès que vous vous en rendez compte.
- **moins de 12 heures avant la prochaine dose prévue** : ne prenez pas la dose manquée et injectez la dose suivante à l'heure habituelle.

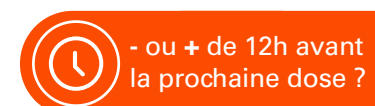







- ou + de 12h avant
la prochaine dose ?

Comment entretenir mon stylo Yorvipath® ?

- Manipulez le stylo avec précaution.
- Gardez le stylo au sec.
- Nettoyez le stylo à l'aide d'un chiffon humide.
- Ne laissez pas tomber le stylo et ne le heurtez pas contre des surfaces dures. Si cela a été le cas, testez l'écoulement du stylo (rubrique 2, étapes A à C) avant la prochaine utilisation.
- N'exercez pas de force excessive sur le stylo. Il est possible qu'il soit vide ou endommagé et qu'il ne fonctionne plus correctement.
- Ne tentez pas de réparer vous-même un stylo endommagé.
- N'utilisez jamais un stylo endommagé.

Journal de suivi des injections de Yorvipath®

DATE 	DOSE DE YORVIPATH® 	SITE D'INJECTION 
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	

DATE 	DOSE DE YORVIPATH® 	SITE D'INJECTION 
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	
 µg/j	

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable ou en cas d'erreur médicamenteuse, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles à l'adresse suivante : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

Pour plus d'informations, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament, ou sur la base de données publique des médicaments en flashant ce QR code ou sur <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

Besoin d'aide ?

Si vous avez la moindre question, contactez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière pour en parler.

Vous pouvez également contacter Ascendis Pharma :

- **Téléphone** : 01.72.35.02.00
- **Courriel** : MedInfo-FR@ascendispharma.com
- **Site internet** : www.ascendispharma.fr/medinfo/



Retrouvez la **vidéo de démonstration du stylo Yorvipath®** en flashant ce QR code ou en vous rendant sur ce site internet : <http://ascendispharma.fr>

Ascendis®, le logo Ascendis Pharma, le logo de la société et Yorvipath® sont des marques déposées appartenant au groupe Ascendis Pharma. © Octobre 2025 Ascendis Pharma France. Marque appartenant ou concédée au groupe Ascendis Pharma. Ascendis Pharma France SAS - 3, rue de Stockholm, 75008 Paris - Tél. : 01 81 79 38 20 - S.A.S. au capital de 10 000 € - 983 998 436 R.C.S. Paris - email : ascendisfrance@ascendispharma.com